

Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Toma de muestra de 1° chorro de orina

Indicaciones para el personal de salud

Personas con VULVA

Solo se debe considerar una muestra de primer chorro de orina si no es posible una autotoma vaginal. La orina de primer chorro presenta menor sensibilidad.

Personas con PENE

La muestra de primer chorro de orina es adecuada.

No debe tomarse la muestra cuando la persona

- Se encuentre menstruando (EXCLUYENTE).
- Haya tomado antibióticos hasta 72 hs. previas (DESEABLE).
- Haya tenido relaciones sexuales en las ultimas 24 hs. (DESEABLE).

Indicaciones para instruir a la persona

- Debe tener una retención urinaria de al menos 1 hora.
- No es necesario que sea la primer orina de la mañana.
- No debe higienizar sus genitales antes de realizar la toma.
- Debe recolectar los primeros 20 a 30 ml de la primera fracción de orina (1/4 de frasco aproximadamente).

Instrucciones al recibir la muestra por parte de la persona

- Transferir con la pipeta de transferencia provista, una fracción del volumen de la orina y colocarla en el tubo de muestra del kit utilizado. El volumen final debe estar dentro de las dos líneas marcadas en el tubo.
- Conservar a temperatura ambiente (2-30°C) o heladera hasta máximo 30 días.



Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Toma de muestra de 1° chorro de orina

Indicaciones para la persona

1

Lave sus manos con agua y jabón.
NO higienice sus genitales.




2

Recolecte el primer chorro de orina en el recipiente provisto, llene aproximadamente 1/4 del frasco. Termine de orinar en el inodoro.



3

Tape y cierre el frasco firmemente, entréguelo al personal de salud.

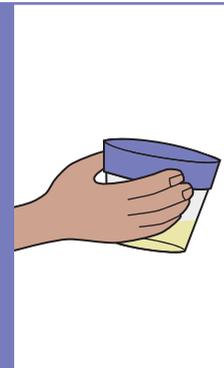

4

Lave sus manos con agua y jabón.



Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Auto - toma de muestra vaginal

Indicaciones para el personal de salud

No debe tomarse la muestra cuando la persona

- Se encuentre menstruando (EXCLUYENTE).
- Haya tomado antibióticos hasta 72 hs. previas (DESEABLE).
- Haya tenido relaciones sexuales en las ultimas 24 hs. (DESEABLE).

Indicaciones para instruir a la persona

- Indicar a la persona el uso de un baño como espacio cómodo e íntimo para realizar la autotoma.
- Explicar que la punta del hisopo no debe tocar nunca ninguna superficie, ni siquiera con las manos.
- Indicar que manipule el tubo con cuidado ya que contiene un material líquido, el cual no debe volcarse.


Instrucciones al recibir la muestra por parte de la persona

- Evaluar la calidad de la muestra recibida (hisopo sumergido en el líquido, presencia de sangre, etc.).
- Rotular la muestra.
- Conservar a temperatura ambiente (2-30°C) o heladera hasta máximo 30 días.

HISOPADOS ACEPTABLES



HISOPADOS NO ACEPTABLES

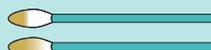

Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Auto - toma de muestra vaginal

Indicaciones para la persona

- 1** Lave sus manos con agua y jabón.
NO higienice sus genitales.




- 2** Colóquese en una posición cómoda, sentada en el inodoro, o de pie, levantando una pierna y apoyándola en el inodoro.



- 3** Sostenga el hisopo a 5 cm de la punta. Introduzca el hisopo dentro de la vagina hasta sus dedos. Gire durante 30 segundos mientras frota el hisopo contra las paredes de la vagina.



- 4** Introduzca el hisopo dentro del tubo y quieb্রে el vástago a la altura de la línea. Cierre bien el tubo.

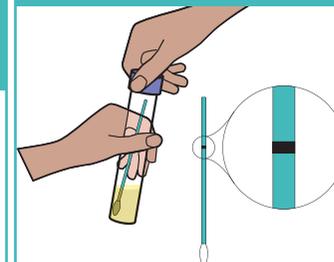

- 5** Lave sus manos con agua y jabón.



Nota: Puede conservar a temperatura ambiente (2-30°C) o heladera hasta la entrega al personal de salud.

Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Auto - toma de muestra rectal

Indicaciones para el personal de salud

No debe tomarse la muestra cuando la persona

- Haya tomado antibióticos hasta 7 días. previas (DESEABLE).
- Haya tenido relaciones sexuales en las ultimas 24 hs. (DESEABLE).

Indicaciones para instruir a la persona

- Indicar a la persona el uso de un baño como espacio cómodo e íntimo para realizar la autotoma.
- Explicar que la punta del hisopo no debe tocar nunca ninguna superficie, ni siquiera con las manos.
- Indicar que manipule el tubo con cuidado ya que contiene un material líquido, el cual no debe volcarse.


Instrucciones al recibir la muestra por parte de la persona

- Evaluar la calidad de la muestra recibida (hisopo sumergido en el líquido, presencia de sangre, etc.).
- Rotular la muestra.
- Conservar a temperatura ambiente (2-30°C) o heladera hasta máximo 30 días.

HISOPADOS ACEPTABLES



HISOPADOS NO ACEPTABLES

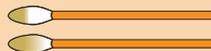

Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Auto - toma de muestra rectal

Indicaciones para la persona


- 1** Lave sus manos con agua y jabón.
NO higienice sus genitales.




- 2** Colóquese en una posición cómoda, sentada/o en el inodoro, o de pie, levantando una pierna y apoyándola en el inodoro. Use su mano libre para separar una de las nalgas.



- 3** Inserte con cuidado el hisopo aproximadamente 2 a 3 cm a dentro de su ano y gírelo suavemente durante 10 segundos tocando las paredes de su ano. Retírelo suavemente.

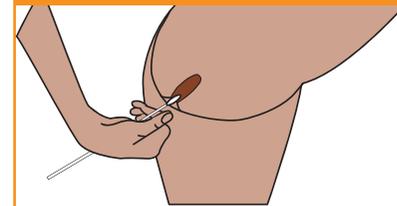

- 4** Introduzca el hisopo dentro del tubo y quíbrelo el vástago a la altura de la línea. Cierre bien el tubo.

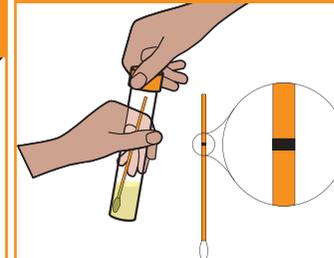

- 5** Lave sus manos con agua y jabón.



Nota: Puede conservar a temperatura ambiente (2-30°C) o heladera hasta la entrega al personal de salud.

Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR

Toma de muestra faringea

Indicaciones para el personal de salud

No debe tomarse la muestra cuando la persona

- Haya tomado antibióticos hasta 7 días previos (DESEABLE).

Indicaciones para instruir a la persona

- Sentar a la persona en una silla con la cabeza levemente inclinada hacia arriba.

Instrucciones al recibir la muestra por parte de la persona

- Evaluar la calidad de la muestra recibida (hisopo sumergido en el líquido).
- Rotular la muestra.




Testeo *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* por PCR


Toma de muestra faringea

Indicaciones para la persona


- 1** Sentar a la persona en una silla con la cabeza levemente inclinada hacia arriba y solicitarle que abra la boca.

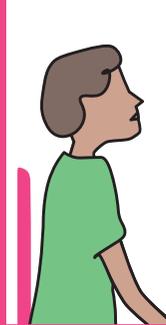


- 2** Con ayuda de un depresor de lengua empuje la lengua hacia abajo. Localice la orofaringe. Puede ayudar el pedir a la persona que diga "aaaaa".

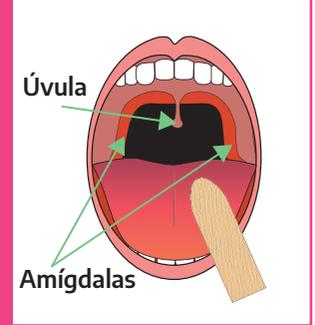

- 3** Introduzca con cuidado el hisopo hasta la orofaringe y rótelo por las amígdalas haciendo presión sobre la misma durante 5 a 10 segundos.

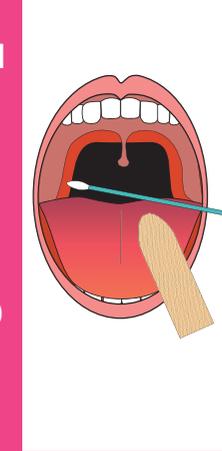

- 4** Introduzca el hisopo dentro del tubo y quieb্রে el vástago a la altura de la línea. Cierre bien el tubo.

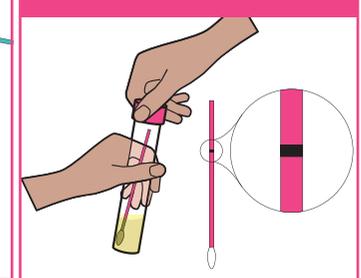

- 5** Lave sus manos con agua y jabón.

